



 **Grupo PolYanguas**

ORTOPEDIA TÉCNICA
Cuidados para el paciente
post-operatorios y
post-traumáticos

- CUELLO
- TRONCO
- MIEMBRO SUPERIOR
- MIEMBRO INFERIOR

www.polyanguas.net

ÍNDICE

CUELLO

Collarín cervical para soporte ligero. _____	3
Collarín cervical regulable en altura. _____	3
Collarín Philadelphia. _____	3
Collarín Philadelphia ajustable. _____	4
Tracción cervical. _____	4

TRONCO

Corsé Jewett. _____	5
Ortesis de columna taylor. _____	5
Ortesis de columna taylor Camp XXI. _____	5

MIEMBRO SUPERIOR

Férula de inmovilización de muñeca en termoplástico (en dorsiflexión) _____	6
Férula inmovilizadora de mano antiespástica. _____	6
Ortesis de codo y control flexión-extensión. _____	7
Férula de stack moldeada. _____	7
Férula inmovilizadora de dedo de aluminio (rana federica) _____	7
Férula progresiva de dedo. _____	7
Brace húmero almohadillado. _____	8

MIEMBRO INFERIOR

Polaina funcional (PTB) _____	8
Jousto peroneus. _____	8
Soporte modular de abducción de hombro a 45° ó 90°. _____	9
Férula de abducción y aducción de la cadera. _____	9
Ortesis antiéquino de polipropileno - rancho de los amigos _____	9
Cojín de abducción de cadera. _____	10
Pañal de abducción. _____	10
Férula Von-Rossen. _____	10
Zapato post-quirúrgico. _____	11
Férula multiposicional pie-tobillo. _____	11

CUELLO

COLLARÍN CERVICAL PARA SOPORTE LIGERO



Alcolchado cubierto con tejido 100% algodón. Cierre auto-adhesivo. Accesorios: Fundas hipoalérgicas lavables diariamente.

Indicaciones: Cervicartrosis, tortícolis, readaptación tras collarín rígido o minerva. Preventivo para utilizarlo durante trayectos largos (coche, tren, avión, etc.).


Dos alturas: 7'5 cm y 9'5 cm

Color: • Azul • Gris

Tallas	0	1	2	3	4	5
Medida contorno cuello cm	25-28	29-32	33-37	38-42	43-47	48-51

Ref. PolYanguas
PY00280

COLLARÍN CERVICAL REGULABLE EN ALTURA

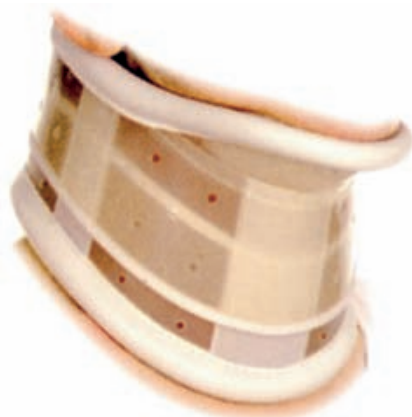

Formado por dos placas de polietileno perforadas para una mejor ventilación. Los bordes están recubiertos con un acolchado de protección que asegura un buen confort. Cierre autoadhesivo.

Indicaciones: Traumatismo cervical, esguince cervical de gravedad media, neuralgia cervicobraquial reumática.

Tallas	1	2	3
Medida contorno cuello cm	27-38	38-47	>47

Ref. PolYanguas
PY00615

COLLARÍN PHILADELPHIA



Restringe los movimientos de cabeza y cuello limitando la flexo-extensión y la rotación del segmento cervical. Indicado para cervicalgias de origen muscular o traumático que requiera estabilización en la fase aguda y un período de readaptación.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

Ref. PolYanguas
PY00365

CUELLO



COLLARÍN PHILADELPHIA AJUSTABLE

Restringe los movimientos de cabeza y cuello limitando la flexo-extensión y la rotación del segmento cervical. Indicado para cervicalgias de origen muscular o traumático que requiera estabilización en la fase aguda y un período de readaptación. Ajustable en altura.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

Ref. PolYanguas
PY00366



TRACCIÓN CERVICAL

Mediante el sistema de poleas nos permite regular el ángulo de tracción. El llenado de la bolsa permite regular el peso o fuerza de tracción. Indicado para el tratamiento de tracción para fracturas y luxaciones de la columna cervical.

Ref. PolYanguas
PY00616

TRONCO



CORSÉ JEWETT

Corsé que se utiliza generalmente en las fracturas vertebrales, con dos apoyos anteriores situados en manubrio esternal y pubis y un apoyo posterior a una altura media de la columna vertebral.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

Ref. PolYanguas

PY00380



ORTESIS DE COLUMNA TAYLOR

Corsé dorso lumbar formado por una estructura metálica forrada, una tela almohadillada y por una faja de tela graduable en anchura mediante cordonera por su parte anterior. La funda de las bandas posteriores se prolonga mediante tirantes que permiten graduar la tensión que ejercen los hombros hacia atrás. Latex Free. Existe un modelo para señora y otro para caballero.

Indicaciones: Afecciones de columna que necesitan inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la zona media y baja de la columna dorsal y toda la lumbar.

Tallas	S	M	L	XL
Medida contorno cadera cm	76-84	84-93	93-104	104-112

Ref. PolYanguas

Caballero: PY00260

Ref. PolYanguas

Señora: PY00259



ORTESIS DE COLUMNA TAYLOR CAMP XXI

Corsé Taylor fabricado con los modernos materiales Camp XXI. Dispone de una estructura dorsal de duraluminio con amplia regulación en altura y cinchas de hombro almohadilladas y de longitud variable que se adaptan al usuario de forma muy sencilla independientemente de su altura. Gracias a la elasticidad del material se consigue el máximo ajuste a las distintas anatomías de los pacientes. Al ser un material transpirable se consigue una prenda más cómoda y mejor tolerada que el Corsé Taylor tradicional. Lavable a máquina. Unisex. Latex Free.

Indicaciones: Afecciones de columna que necesitan inmovilización de la flexoextensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la zona media y baja de la columna dorsal y toda la lumbar.

Tallas	S	M	L	XL	XXL
Medida contorno cadera cm	80-95	90-105	100-115	110-125	120-135

Ref. PolYanguas

PY00262

MIEMBRO SUPERIOR



FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN DE MUÑECA EN TERMOPLÁSTICO (EN DORSIFLEXIÓN)

Fabricada en termoplástico, forro interior de foam y rizo (absorbente y lavable), para evitar la sudoración y aumentar el confort. Permite el moldeo por medio de pistola de aire caliente.

Indicaciones: Tratamiento para el dolor, algias post-traumáticas, como complemento para estabilización de la muñeca después de la artrodesis. Como tratamiento post-operatorio, síndrome del túnel carpiano, tendosinovitis y procesos inflamatorios en la región del carpo. Dadas sus características permite pequeños ajustes y adaptaciones.

Modelos: Derecha e Izquierda.

Color: • Blanco

Tallas	S/1	M/2	L/3
Perímetro de muñeca en cm	14-16	16-18	18-20
Largo cm	22	24	26

(Las tallas han sido previstas utilizando el forro interior)
Cada órtesis incluye 2 forros intercambiables

Ref. PolYanguas

PY00617



FÉRULA INMOVILIZADORA DE MANO ANTIESPÁSTICA

Fabricada en termoplástico, forro interior de foam y rizo (absorbente y lavable), para evitar la sudoración y aumentar el confort. Permite el moldeo por medio de pistola de aire caliente.

Indicaciones: Férula de reposo como tratamiento del dolor, patologías neurológicas, hemiplejías, especialmente indicada en parálisis espásticas, manteniendo la bóveda palmar, la mano y la muñeca en posición inhibidora de los reflejos, previniendo las deformidades debidas a espasmos y contracciones, evitando la mano en garra. Dadas sus características permite pequeños ajustes y adaptaciones.

Modelos: Derecha e Izquierda

Color: • Blanco

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4
Anchura de mano en cm	6-7	7-8	8-9	9-10
Largo cm	34	36	38	40

(Las tallas han sido previstas utilizando el forro interior)
Cada órtesis incluye 2 forros intercambiables

Ref. PolYanguas

PY00618

MIEMBRO SUPERIOR



ORTESIS DE CODO Y CONTROL FLEXIÓN-EXTENSIÓN

Formada por una valva de brazo y otra de antebrazo unidas entre sí mediante articulación monocéntrica con posibilidad de regular la flexoextensión de 0° a 90° en intervalos de 30° en 30°. La articulación con pletinas, que van embutidas en tejido con microvelcro, nos permite adaptarnos a la longitud del miembro superior tratado. Las valvas, cortadas anatómicamente y perforadas para mejorar la transpiración, tienen una capa externa de velour, una interna de suave toalla hipoalérgica y un alma de termoplástico que proporciona soporte y rigidez.

Indicaciones: Fracturas diafisarias de húmero. Fracturas del tercio medio inferior de húmero (supracondíleas). Fracturas de cúbito y radio. Fracturas patológicas (metástasis osteolíticas). En cirugía de los ligamentos del codo.

Tallas	S	M	L
Perímetro de zona A en cm	26-32	32-37	37-43
Perímetro de zona B en cm	20-25	25-30	30-35



Longitud aproximada (mínima 42, máxima 44 cm)

Ref. PolYanguas
PY00188



FÉRULA DE STACK MOLDEADA

Inmoviliza las articulaciones interfalángicas distales en ligera hiperextensión, liberando las proximales. Se puede conformar manualmente con aire caliente seco.

Indicaciones: Procesos dolorosos por traumatismo directo de la falange distal de los dedos.

Tallas	1	2	3	4	5	6	7	8
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Ref. PolYanguas
PY00363




FÉRULA INMOVILIZADORA DE DEDO DE ALUMNIO (RANA FEDERICA)

Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica distal y proximal. Fabricada en aluminio moldeable y forrada en su interior.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

Ref. PolYanguas
PY00368

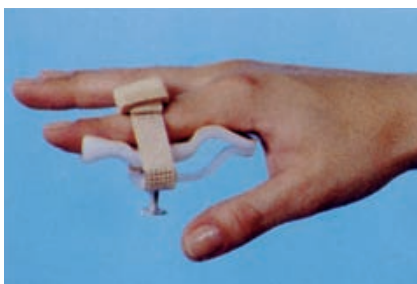

FÉRULA PROGRESIVA DE DEDO

Ortesis activa del dedo con tornillo para extensión progresiva.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

Ref. PolYanguas
PY00369

MIEMBRO SUPERIOR



BRACE HÚMERO ALMOHADILLADO

Ortesis bivalva en termoplástico almohadillado con cierre velcro y tirante de sujección para el tratamiento funcional de fracturas de húmero.

Tallas	S	M	L	XL
--------	---	---	---	----

Ref. PolYanguas
PY00620

MIEMBRO INFERIOR



POLAINA FUNCIONAL (PTB)

Ortesis bivalva en termoplástico, con cazoleta para el talón, para el tratamiento funcional de las fracturas diafisarias de tibia y tobillo. Esguinces de tobillo crónicos o recidivantes.

Modelos: Derecha e Izquierda

Tallas	S	M	L	XL
Perímetro de pantorrilla en cm	29-32	33-36	37-40	41-44

Ref. PolYanguas
PY00621



JOUSTO PERONEUS

La férula JOUSTO está indicada para pacientes que padecen parálisis perónea que requieren poca o ninguna corrección del pie. Estructura sencilla que hace que se pueda llevar con cualquier tipo de zapato o bota.

Ref. PolYanguas
PY00243

MIEMBRO INFERIOR



SOPORTE MODULAR DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO A 45° ó 90°

Consta de un cojín con base bilateral que permite un ángulo de abducción de hombro de 45° ó 90° según la colocación del mismo. La unión de todas las piezas se realiza por medio de cierres de velcro.

Indicaciones: Tratamiento post-operatorio. Prótesis de hombro, fracturas de la tuberosidad humeral, diagnóstico y artroscopia del hombro.

Ref. PolYanguas
PY00277

Tallas	Largo
Medir longitud desde el pliegue del codo hasta flexión de los dedos.	< 35 cm



FÉRULA DE ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN DE LA CADERA

La articulación ajustable impide el riesgo de luxación en el momento de la flexión, sin impedir la posibilidad de caminar y respetando la fisiología articular en los movimientos. La articulación ajusta la abducción/aducción sobre el paciente entre -5° y +25°, pudiendo ajustar las partes según la morfología del paciente. Modelo bilateral.

Indicaciones: Cuidados post-operatorios, artroplastia, inestabilidades crónicas de cadera.

Tallas	S	M	L	XL
Perímetro de cintura en cm a la altura del ombligo	65-80	80-95	95-110	110-125
Perímetro del muslo en cm a la altura de la ingle	43-50	50-60	60-68	68-75

Ref. PolYanguas
PY00279



ORTESIS ANTIEQUINO DE POLIPROPILENO - RANCHO DE LOS AMIGOS

Dispositivo antiequino posterior de polipropileno que se utiliza para luchar contra la deformidad en equino del pie. Puede encontrarse de planta entera para personas que no conservan movilidad en los dedos y con rectificación para pie varo que incluye una goma lateral de corrección.

Modelos: Derecha e Izquierda.

Tallas	S	M	L
Según número de calzado europeo	34-38	38-42	42-45

Ref. PolYanguas
PY00383

MIEMBRO INFERIOR



COJÍN DE ABDUCCIÓN DE CADERA

Permite colocar los miembros inferiores en ligera abducción. Revestimiento de vinilo (facilita la limpieza). Las bandas de protección de los miembros inferiores pueden suministrarse por separado. Fijación por medio de bandas adhesivas. Indicaciones: Sujeción post-operatoria de los miembros inferiores (cadera, pelvis). Luxación de cadera.

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas
PY00278



PAÑAL DE ABDUCCIÓN

Permite la higiene habitual del niño como si fuese un pañal normal. Ajuste perfecto con óptima abducción correctora de caderas. Fácil colocación. Extensible para mejor eficacia durante el crecimiento.

Tallas	S	L
Distancia entre rodillas en abducción en cm	14-20	21-30

Ref. PolYanguas
PY00371



FÉRULA VON-ROSSEN

Férula de abducción en aluminio muy maleable, forrada de Termolén. Indicado especialmente en recién nacidos.

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas
PY00372

MIEMBRO INFERIOR



ZAPATO POST-QUIRÚRGICO

Fabricado en horma neutra, adaptándose tanto al pie derecho como al izquierdo. Suela antideslizante y sistema de cierre con velcro permitiendo la adaptación a todo tipos de pies. Existe también el modelo en Talo especialmente indicado cuando el vendaje produce una inmovilización tibio-tarsiana permitiendo la carga y la marcha desde la fase de apoyo hasta la fase de despegue.

Indicaciones: Post-cirugía del pie y dedos, en aquellos casos en los que por problemas de retorno venoso (edemas), no es posible la adaptación de un calzado convencional.

Tallas	1	2	3	4	5
Nº calzado	33-35	36-38	39-40	41-42	43-45

Ref. PolYanguas
Post-quirúrgico: PY00150

Ref. PolYanguas
Post-quirúrgico-talo: PY00389



FÉRULA MULTIPOSICIONAL PIE-TOBILLO

Férula fabricada en polietileno de alta densidad. Incorpora un sistema que nos permite regular la flexión plantar y la dorsal en un rango de 75° en intervalos de 15°. El forro interior es de rizo en algodón lavable y transpirable. Se cierra mediante cinchas de velcro. Se adapta tanto a pie derecho como a izquierdo.

Indicaciones: Post-operatorio de rodilla, cadera y pies siempre que sea necesario el control de la rotación del miembro inferior. Hemiplejía. Parálisis miembro inferior. Fascitis plantar.

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4
Nº de calzado	<32	32-38	39-44	>44

Ref. PolYanguas
PY00619



Grupo PolYanguas

Calpe

Ortopedia
Avda. de Ifach, 10 03710 Calpe (Alicante)
Tel. 965 837 607 Fax. 965 830 576

Benitachell

Ortopedia - Parafarmacia
Avda. Lepanto, 2 03726 Benitachell (Alicante)
Tel. 966 493 870 Fax. 966 493 870

Alicante

Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia
C/ Aaiún, 1 03010 Alicante
Tel. 965 241 900 Fax. 965 246 843

Ortopedia
Avda. Padre Esplá, 29 03013 Alicante
Tel. 965 205 961

Elda

Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia
C/ González Bueno, 17 03600 Elda (Alicante)
Tel. 966 980 001 Fax. 966 980 803

Central

Avda. Ifach, 10 03710 Calpe (Alicante)
Tel. 902 158 572 / 965 831 802
Fax. 965 874 213
www.polyanguas.net

Pedidos

info@polyanguas.net
presupeorto@polyanguas.net